

イオン効果で 虫歯・歯周病予防



イオン歯ブラシ
ブラシ
交換式 **IONIC**
[アイオニック]

一般的な歯ブラシと比べ、イオン効果で

歯垢除去率 **48%アップ**

大学臨床テスト実証済み

大切な歯を守る歯ブラシも、いまやイオンの時代。

マイナスイオンによる歯垢が落ちるしくみ

ionicはイオン発生電池を内蔵しているため、毛先からマイナスイオンを発生し、
架橋結合を緩ませる(脱極作用)ことで簡単に歯垢を除去^{※1}します。

歯垢除去率はイオンが発生しない手磨き用歯ブラシと比べて48%アップ。

歯垢は口臭の原因のひとつでもあるため、ionicは口臭予防にも役立ちます。

※1: マイナスイオン効果臨床テスト実施済 (東京歯科大学・広島大学・九州歯科大学・東京医科歯科大学・米国マーケット大学等)



歯垢(通常マイナスに帯電)は唾液中のカルシウム等の
プラスイオンの作用で歯(通常はマイナスに帯電)の表面に
吸着しているといわれています(架橋結合)



「ionic」は内蔵電池から微弱電流を流すことで毛先に
マイナスイオンを発生させてこの結合を電氣的に緩めて
歯垢を落としやすくします(脱極作用)

一般的な歯ブラシとionic歯ブラシを使用した際の比較

イオン効果検証

染め出し後

左右2分間ずつブラッシング

※弊社協力歯科医院様からのご提供



2分後




右側が一般的な歯ブラシ 左側がionic歯ブラシ(スリムヘッド)使用

抗菌毛で清潔・安心


ionicの抗菌毛は「バクテキラー」※1を添加。
雑菌の増殖を抑制し※2、ブラシを清潔に保ちます。

※1 富士ケミカル(株)製 ※2 JIS Z2801 抗菌性試験による

一般細菌

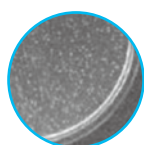

24時間後

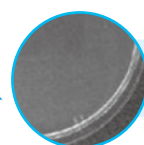

左から
○ ホワイト
○ ライトピンク
○ ライトブルー

1本
患者参考価格(税込)
880円
本体6本(各2色)
ディスプレイ箱入

柄の材質	ABS/PP 樹脂
毛の材質	飽和ポリエステル樹脂
毛のかたさ	やわらかめ
耐熱温度	80℃

抗菌フラット毛

スリムヘッド
やわらかめ



抗菌フラット毛

薄型コンパクトヘッド
やわらかめ




ブラシ交換を行うことで
廃棄プラスチックを大幅に
削減することができます

- スリムヘッド
フラット3列
- 薄型コンパクトヘッド
フラット4列

替えブラシ
2本入
患者参考価格(税込)
440円

使い方

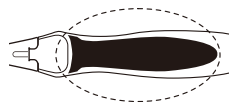

「背面の黒い部分」に
手が触れるようにして磨くことで
イオンが発生します。
触れる手を濡らしておくと
より効果的です。


お手入れ方法



フルッ!
ブラシヘッドをつかみ本体を
回して取り外してください。
回しにくい場合は
まっすぐ引き抜いてください。



カチッ! しっかり差し込む
ご使用後はブラシを外し
水でよく洗い流してから
取り付けてください。

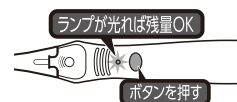

ランプが光れば残量OK
ボタンを押す
ブラッシング中にボタンを
押す必要はありません。
電池寿命:1日15分使用で1年以上
※電池交換はできません

取扱店

販売元

Quest

株式会社クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
お問い合わせ 0885-38-9777

製造元

アイオニック株式会社

〒270-0145 千葉県流山市名都借(なづかり)914-1

