

小臼歯用 CAD/CAM冠材料Ⅱ

アルタイルブロックⅡ

AltairBlockⅡ

NEW



管理医療機器 認証番号:303AFBZX00061000


全サイズ・全シェードに 1ノッチタイプを追加!



- ◆ 歯科切削加工用レジン材料
- ◆ 保険適用

寸法	A	B	C
Sサイズ	10	12	16
Mサイズ	12	14	18

単位:mm

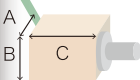

クラウンなどの
歯冠修復物に
使用可能

高い強度と
優れた研磨性

さまざまな
ミリングマシンに
対応可能

標準価格
9,000円 (Sサイズ)
9,700円 (Mサイズ)

小臼歯用 CAD/CAM冠材料Ⅰ

アルタイルブロック

AltairBlock



管理医療機器 認証番号:230AFBZX00093000

種類	タイプ	シェード			1ノッチ	3ノッチ	サイズ	包装	曲げ強度	ビッカース硬度
アルタイルブロック	I	A2	A3	A3.5	×	○	S・M	5個入/箱	198MPa	65HV0.2
アルタイルブロックⅡ	Ⅱ	A2	A3	A3.5	○	○			220MPa	70HV0.2

※平均値データ(当社調べ)

前歯用 CAD/CAM冠材料Ⅳ

ヴィーナスブロック

VenusBlock

NEW



管理医療機器 認証番号:304AFBZX00009000

全サイズ・全シェードに 1ノッチタイプを追加!




3ノッチタイプは在庫なくなり次第1ノッチタイプに移管します

- ◆ 歯科切削加工用レジン材料
- ◆ 保険適用

寸法	A	B	C
14Lサイズ	14.5	14.5	18.0

単位:mm

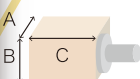

天然歯に近い
グラデーション再現

高い強度と
優れた研磨性

10~100μmの
3種類のフィラーを
クラスター化

標準価格
22,000円

種類	タイプ	シェード			1ノッチ	3ノッチ	サイズ	包装	曲げ強度	ビッカース硬度
ヴィーナスブロック	Ⅳ	MLA2	MLA3	MLA3.5	○	×	14L	5個入/箱	220MPa	70HV0.2

※平均値データ(当社調べ)

歯科用キャスティングワックス

ピュア ワックスディスク



一般医療機器 届出番号：36B2X1000600093

良好な切削を有し、焼却後の残りがすを殆ど出しません。操作性にも優れ切削後の加工が容易です。クリストバライト系埋没材を使用する場合は急速(急激)な加熱は避けてください。ワックスパターンはある程度の間隔(1mm以上)をあけて植立してください。

- 径 98mm
- 厚み レギュラー 14・16・17・20・22(mm)
ハード 14・20(mm)
- 色調 ブルー
- 包装 1枚 / 箱

標準価格
レギュラー 3,200円
ハード 3,400円

歯科用キャスティングワックス

ワックスディスク エクストラ

切削後の築盛やマージン調整が容易



一般医療機器 届出番号：36B2X10006000126

切削後の加工が必要な時の使用に向いています。クリストバライト系埋没材を使用する場合は急速(急激)な加熱は避けてください。ワックスパターンはある程度の間隔(1mm以上)をあけて植立してください。

- 径 98mm
- 厚み 14・16・17・20(mm)
- 色調 グレー
- 包装 1枚 / 箱

標準価格
3,000円

歯科用キャスティングワックス

ワックスディスク ファースト

ヒートショック対応



一般医療機器 届出番号：36B2X10006000151

操作性に優れており、切削後の加工が容易です。オープンタイプにも使用でき、急速加熱にも対応しています。

- 径 98mm
- 厚み 14・20(mm)
- 色調 グレー
- 包装 1枚 / 箱

標準価格
3,000円

歯科切削加工用レジン材料

ピュア PMMA ディスク



管理医療機器 認証番号：227AFBZX00091000

クリアー色はスプリント、サージカルガイド、ナイトガードの製作、歯冠色はプロビジョナルレストレーション、テンポラリークラウンの製作、マルチレイヤーディスクはより審美性を重視したプロビジョナルレストレーション製作にご使用いただけます。

- 径 98mm
- 厚み 15・20(mm)
- 色調 クリアー A1 A2 A3
MLA2 MLA3 MLA3.5
(※マルチレイヤーは20mmのみ)
- 包装 1枚 / 箱

標準価格
クリアー 5,100円
A1/A2/A3 4,800円
MLA2/MLA3/MLA3.5 9,000円

歯科用研削器材

クエストミリングバー



一般医療機器 届出番号：36B2X10006000130

DGSHAPE社の歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットを使用し、クエスト専用のCAMソフトをご利用される場合におすすめの切削加工用のミリングバーです。

DLC: 硬質潤滑被膜コーティング
DIA: 微結晶ダイヤモンドコーティング

被削材の材質	コーティング	
	DLC	DIA
半焼結ジルコニア	○	○
PMMAレジン	○	×
ワックス	○	×
ハイブリッドレジン	×	○

- 包装 1本 / ケース

標準価格
DLC 10,000円
DIA 21,000円

歯科技工用光学印象採得補助材料

ピュア スキャンパウダー



一般医療機器 届出番号：36B2X10006000108

パウダーを固形にしたことで無駄なく、被膜を薄く均一に塗ることができます。付属の専用筆を使うとパウダーのノリが良くなります。スパーサーや硬化剤、コーティング処理されている模型にも使用できます。また、ワックスアップ後のダブルスキャン用としても使用できます。

- 包装 10g 筆付 / ケース

標準価格
5,000円

